

INSTRUCCIONES DE USO BAGNOLETTO



Extender BAGNOLETTO

Movilizar al paciente hacia un lado de la cama.



Colocación

Colocar el BAGNOLETTO parcialmente debajo del paciente. Girar al paciente y desplegar completamente la bañera.








Baño

Utilice el tanque de agua a presión con su grifo de ducha (elemento opcional).




Desmontaje

Vacíe el exceso de agua. Retire la bañera y desmonte BAGNOLETTO

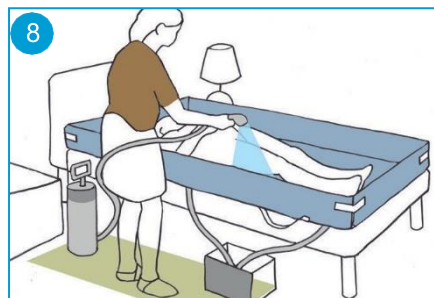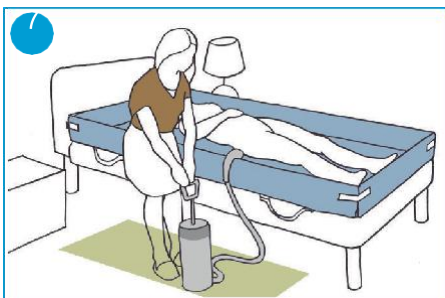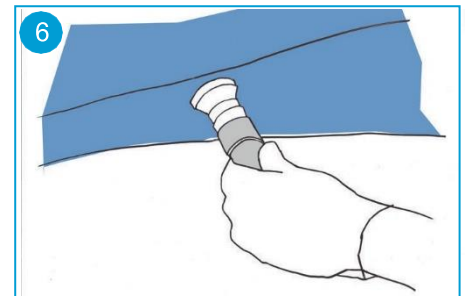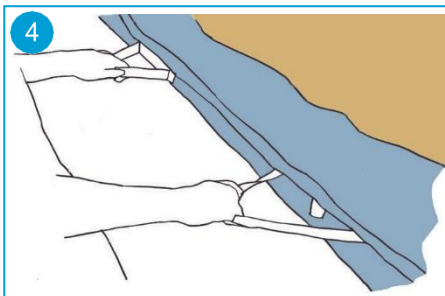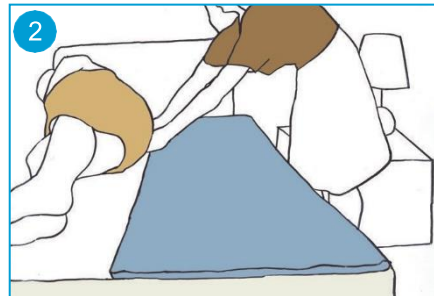

El sistema cuenta con varios puntos de drenaje de agua y mangueras rectas o curvas que facilitan esta operación. El agua se puede traer desde un grifo con una extensión, o se puede usar el tanque de agua a presión (accesorio opcional). Para uso profesional en instalaciones residenciales o de rehabilitación, se sugiere utilizar sábanas desechables que se puedan usar para cada lavado.

 Ver el video en
Youtube >





Bolsa de transporte (incluida de serie) para guardar fácilmente el BAGNOLETTO

• **Como usar BAGNOLETTO?**

Extender BAGNOLETTO bajo tu paciente y use el tanque de agua a presión (que contiene agua tibia limpia) para duchar a la persona.

• **Se puede usar en cualquier tipo de cama?**

Si, BAGNOLETTO es apta para cualquier tipo de cama (incluidas las que no tienen laterales).

• **Cuánto mide BAGNOLETTO?**

85 x 190 x 20h cm

• **De qué material esta hecho BAGNOLETTO?**

BAGNOLETTO está fabricado en poliéster y PVC clase 2C



• **Como retiro el agua residual?**

Después del baño, el agua sobrante se saca en cubos específicos (no incluidos), a través de las mangueras suministradas.

• **Que cantidad de agua contiene el tanque?**

La capacidad del tanque opcional es de 10 litros.

• **Es posible añadir soluciones jabonosas al agua?**

Si, es posible añadir cualquier solución al agua.

• **Es necesario mover al paciente?**

No, BAGNOLETTO se puede usar directamente en una persona encamada sin mover al paciente.

• **Cuántas personas son necesarias para el uso del BAGNOLETTO?**

Una persona es suficiente. El baño es sencillo y fácil de ejecutar.

• **Se puede usar BAGNOLETTO sin electricidad?**

Si, BAGNOLETTO se usa sin conectarse a ninguna red eléctrica.

• **Es necesario esterilizarlo tras cada uso?**

Si se utilizan sábanas desechables no es necesario su esterilización.



FAQ

O	Cod. Artículo	Descripción
1	VQ BLBAGNOLE	BAGNOLETTO 85x190x20 cm y tubos de drenaje.
2	VQ BLSERBAT	Tanque de agua a presión BAGNOLETTO
3	VQ BLTELINI	Sábanas desechables para BAGNOLETTO 10 uds. y 4 sujeciones
4	VQ BLSOLOTOLI	Sábanas desechables BAGNOLETTO 10 uds.
5	VQ BLRECIP	Cubo de vaciado plegable. Capacidad 11 litros

